

COMFORTABEL

VEILIG


TOEKOMSTBESTENDIG

WONEN & WERKEN

Uw naasten 24 uur per dag bereikbaar


Ingebruikname Kompy Nano 4G Personenalarmering

1. Zorg dat de Kompy Nano 4G is opgeladen:
   - Sluit de USB-kabel van de oplaadstekker aan op de meegeleverde USB-adapter.

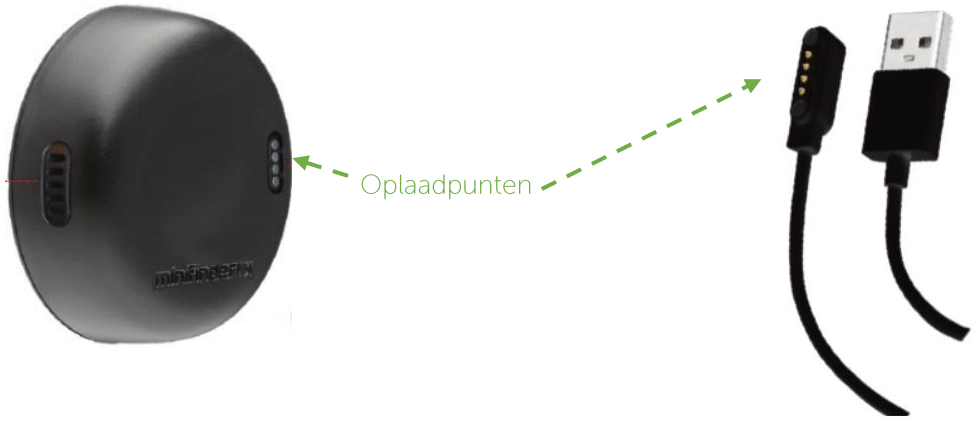

   - Plaats de Nano tegen de laadstekker zodat de oplaadpunten contact maken.
   - De led zal langzaam gaan knipperen tijdens het opladen. Het duurt ongeveer twee tot vier uur om de Kompy Nano 4G volledig op te laden.

2. Zet de Kompy Nano 4G aan door de aan/uit knop ca. 3 seconde in te drukken.

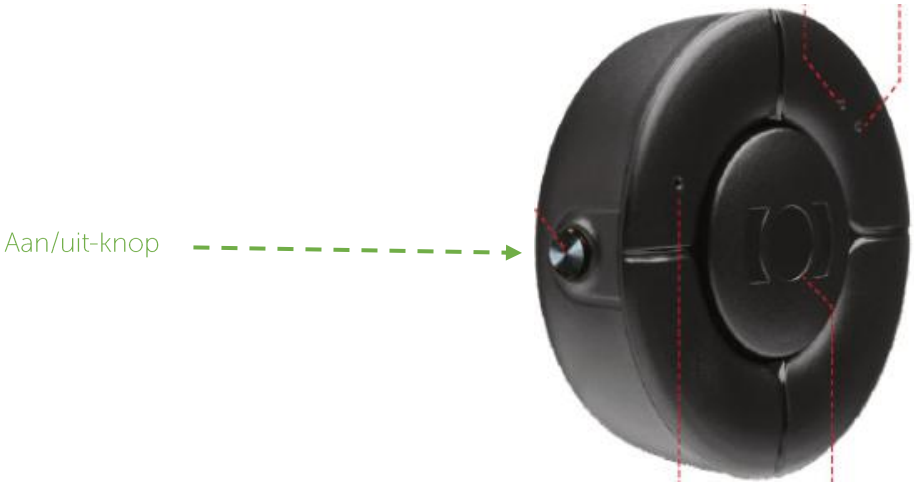

De Kompy Pico uitzetten kan door de aan/uit knop ongeveer 13 sec ingedrukt te houden.

<voor vervolg zie volgende bladzijde>



Met groene en blauwe led's wordt de status van de mobiele verbinding (GSM/GPRS) en locatiedetectie (GPS) aangeven:


Groene LED

1 sec	Langzaam knipperen = zoeken naar gsm-netwerk
3 sec	Kort knipperen = verbonden met gsm-netwerk
☺ 3 sec	Twee keer knipperen = verbonden met gprs
	Continue branden = geen of verkeerde simkaart

Blauwe LED

1 sec	Langzaam knipperen = zoeken naar gps-signaal
☺ 3 sec	Kort knipperen = verbonden met gps

3. Zorg dat de contactpersonen/hulpverleners de Kompy-app hebben geïnstalleerd en zijn ingelogd met de verstrekte inloggegevens. ⚠ ***Het is belangrijk dat te allen tijde minimaal één hulpverlener is ingelogd in de Kompy-app! Dit om te voorkomen dat hulpoproepen niet worden gesignaleerd.***

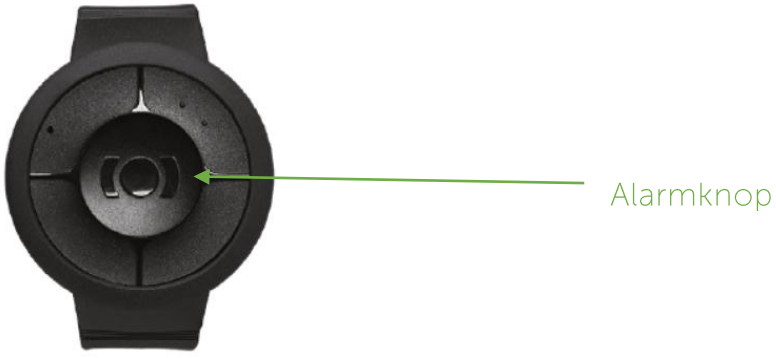

4. Maak een testalarm door de alarmknop aan de voorzijde van de Kompy Nano 4G gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. De Kompy Nano 4G begint vervolgens te trillen en u hoort de gesproken melding: *"Het alarm is geactiveerd."* Tegelijkertijd worden de alarmmeldingen automatisch verzonden naar de smartphone-apps van de gekoppelde contactpersonen en/of hulpverleners. Zolang het alarm niet is geaccepteerd én afgehandeld door (een van de) hulpverlener(s), blijft de Kompy Nano 4G in alarmstand. Zodra een hulpverlener het alarm accepteert, kan deze via de Kompy-smartphone-app een spreek-/luisterverbinding opzetten, zodat direct contact mogelijk is.

Heeft u vragen of wilt u contactpersonen of hulpverleners wijzigen? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen dat de juiste hulpverleners worden gekoppeld aan de Kompy Nano 4G, zodat alarmmeldingen naar de smartphone-apps worden doorgestuurd.